



## SOLUCIÓN DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS Y SUPERFICIES EN GENERAL

### SURFA'SAFE Premium

#### SOLUCIÓN DETERGENTE DESINFECTANTE

Solución detergente desinfectante, destinada a la limpieza y desinfección de dispositivos médicos no invasivos y no sumergibles. Biocida: para superficies en general.

SURFA'SAFE PREMIUM es un producto de limpieza y desinfección de superficies listo para usar.

Combina una eficacia de amplio espectro, tiempos de contacto cortos con una excelente compatibilidad de materiales (incluidas las superficies sensibles al alcohol) y las propiedades de un limpiador suave.

Sus características hacen que SURFA'SAFE PREMIUM sea adecuado para su uso en una amplia gama de superficies en instalaciones de salud, y un producto ideal para cuidados intensivos y otras áreas de alto riesgo.

Esto permite que los productos se utilicen en la práctica tal y como está previsto en sus protocolos, ofreciendo los resultados de desinfección y el nivel de cumplimiento obligatorio para una desinfección eficaz que restrinja la propagación de patógenos.

- Buenas propiedades espumantes.
- Fórmula eficaz sin ingredientes innecesarios (sin perfume ni colorante).
- Limpieza y desinfección en un solo paso, deja la superficie visiblemente limpia.



**ECOLAB®**

[www.ecolab.com](http://www.ecolab.com)

LABORATOIRES  
**ANIOS**  
An Ecolab Company

[www.anios.com](http://www.anios.com)

# SURFA'SAFE Premium

Solución detergente desinfectante, destinada a la limpieza y desinfección de dispositivos médicos no invasivos y no sumergibles. Biocida: para superficies en general.

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Limpia y desinfecta en un solo paso
- Sin alcohol, perfume ni colorante
- Antimicrobiano de amplio espectro y tiempo de contacto optimizado
- Dispensador de espuma compacto para limitar la formación de aerosoles y componentes volátiles (750 ml)
- La fórmula garantiza compatibilidad con una amplia gama de materiales, incluidos los polímeros (por ejemplo, policarbonato, plexiglás)
- Espuma densa para una mejor adherencia a la superficie (750 ml)
- pH 6

## PROPIEDADES MICROBIOLÓGICAS

EFICACIA	TIEMPO DE CONTACTO
Bactericida, conforme con: EN 13727* (1 min), EN 16615* (2 min)	2 min
Levuricida, conforme con: EN 13624* (2 min), EN 16615* (2 min)	2 min
Tuberculocida conforme con EN 14348*	60 min
Eficaz contra virus envueltos conforme con EN 14476*	1 min
EN 14476* Poliomavirus SV40	5 min
EN 14476* Rotavirus	30 sec
Virucida de espectro limitado conforme con EN 14476*	30 min
EN 14476* Adenovirus	30 min
EN 14476* Norovirus (MNV)	15 min

\* condiciones de suciedad

## INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS

PRODUCTO	UNIDAD DE EMBALAJE	CÓDIGO DE PEDIDO
SURFA'SAFE Premium	12 x 750 ml	XXXXXX



**LABORATOIRES ANIOS**  
1, Rue de l'Espoir  
59260 Lezennes  
France

Distribuido por:  
**LABORATOIRES ANIOS**  
1, Rue de l'Espoir  
59260 Lezennes  
France



[www.ecolab.com](http://www.ecolab.com)



[www.anios.com](http://www.anios.com)

## ÁREA DE APLICACIÓN

Solución detergente desinfectante, destinada a la limpieza y desinfección de dispositivos médicos no invasivos y no sumergibles. Biocida: para superficies en general.

## INSTRUCCIONES DE USO

Solución lista para usar. Rocíe la solución de detergente desinfectante en un paño no tejido y limpie.

Extienda uniformemente el producto (+/- 6 ml/m<sup>2</sup> o unas 10 pulverizaciones). Respete el tiempo de contacto indicado para la actividad antimicrobiana requerida.

El enjuague no es necesario a menos que las áreas a tratar estén destinadas a entrar en contacto con la piel o la mucosa.

Consulte las instrucciones de uso del fabricante para la limpieza y desinfección de productos médicos.

Para conocer la frecuencia de uso y limpieza del equipo de aplicación, consulte el plan de higiene establecido. Dossier científico (eficacia, compatibilidad, etc.) disponible bajo pedido.

## INGREDIENTES

Cloruro de didecildimetilamonio (CAS N° 7173-51-5) 3 mg/g, tensoactivos no iónicos, quelato, excipientes.

## CERTIFICADOS


Dispositivo médico y biocida. La actividad antimicrobiana completa de SURFA'SAFE Premium se incluye en el expediente científico disponible a petición.

## ALMACENAMIENTO

Almacenamiento: entre +5°C y +25°C.

## USO SEGURO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y BIOCIDAS

Lea la etiqueta y la información del producto.

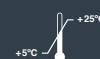

SOLO PARA USO PROFESIONAL.