



División Hospitalaria

Campo de Aislamiento Quirúrgico Steri-Drape™

1010, 1020, 1024, 1015, 1067, 1071

28/02/2012

Ficha Técnica



Descripción

Campos quirúrgicos estériles para el aislamiento del sitio operatorio durante los procedimientos quirúrgicos

Características y Beneficios

- Proporciona un aislamiento estéril sobre la piel, actuando como una barrera mecánica para prevenir la colonización bacteriana al sitio de incisión
- Conformar una barrera física. Previene el paso de los fluidos de un área no estéril a una estéril
- Se adhiere perfectamente a los bordes delimitados del sitio de incisión
- Variedad de formas y tamaños, diseñados para adaptarse a diferentes procedimientos quirúrgicos
- Bolsa recolectora de fluidos, para las referencias 1024 y 1067
- Se ajustan fácilmente a los contornos corporales
- Producto de único uso. Resistente a la rotura
- De uso externo únicamente. Libre de Látex

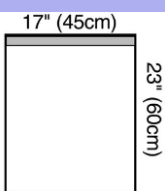
Composición:

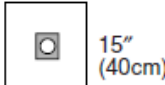
- Respaldo: Película transparente de polietileno
- Adhesivo: Adhesivo de Acrilato
- Líner: Papel siliconado
- Bolsa de Empaque: Papel y Polietileno

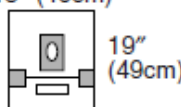
Usos y aplicaciones

Los campos de aislamiento quirúrgicos estériles 3M™ Steri-Drape™ están diseñados para crear un campo estéril durante los diferentes procedimientos quirúrgicos, según la aplicación que se requiera

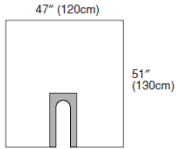


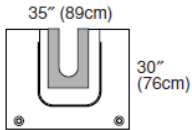
Referencia	Características
	Cobertura larga con acabado mate con inclusión de tira adhesiva
	Tamaño : 45 x 30 cm
	Área adhesiva : 3 cm de ancho
1010	Usos Multipropósito, según necesidad

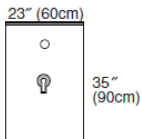
Referencia	Características
	Campo de aislamiento pequeño con apertura adhesiva
	Tamaño : 40 x 40 cm
	Área adhesiva : 10 x 12.5 cm
1020	Apertura circular : 6.3 cm
Usos Recomendados	Cirugía oftalmológica y dermatológica. Procedimientos tales como biopsias, y anestesia

Referencia	Características
	Campo de aislamiento pequeño con apertura adhesiva y bolsa para la colección de fluidos
	Tamaño : 40 x 49 cm
	Área adhesiva : 10 x 12.5 cm
	Apertura ovalada : 3.5 x 6.3 cm
1024	Otros Bolsa para la recolección de fluidos 2 áreas adhesivas para fijación
Usos recomendados	Cirugía oftalmológica y dermatológica. Procedimientos tales como biopsias, y anestesia



Referencia	Características
	Campo de aislamiento con apertura adhesiva en forma de U
	Tamaño : 120 x 130 cm
	Apertura en U : 16.5 x 46cm
1015 U-drape	
Usos recomendados	Neurocirugía y cirugía de ortopedia

Referencia	Características
	Campo de aislamiento en U con bolsa recolectora de fluidos
	Tamaño : 89 x 76 cm
	Apertura adhesiva : 16 x 40 cm
1067	Otros : Bolsa para recolección de fluidos 2 puertos de salida
Usos Recomendados	Neurocirugía y cirugía de ortopedia

Referencia	Características
	Campo de aislamiento urológico
	Tamaño : 60 x 90cm
	Apertura adhesiva : 5.2 cm
1071	Otros : Cobertura para dedo con adhesivo. No contiene látex
Usos Recomendados	Cirugías y procedimientos urológicos



Instrucciones de uso

- Realice la antisepsia del sitio quirúrgico según los protocolos de su institución o rutina recomendada por el médico
- Seleccione el campo según el tipo de procedimiento a realizar
- Deje secar completamente la piel antes de posicionar el campo

Precauciones y advertencias

- Usar siempre sobre la piel limpia y seca
- No desfibrilar a través de los campos de incisión plásticos, ya que la corriente puede formar un arco o producir una desfibrilización ineficiente
- Producto estéril, no lo use si el empaque se encuentra abierto o deteriorado. No se debe re-esterilizar

Almacenamiento y vida útil

Producto de único uso esterilizado con método de rayos gamma

Condiciones de almacenamiento:

Almacene en condiciones normales de temperatura y humedad relativa, 15 – 30 °C y 40 – 60% Hr. Manténgase lejos de calor o humedad excesivo

Vida útil del producto:

Los campos tienen 5 años de vida útil años a partir de la fecha de fabricación

Disposición final

Deseche el campo como desperdicio sanitario. Puede incinerarse. Si contiene restos biológicos, deséchelo como residuo hospitalario peligroso (bolsa roja). Siga los protocolos de su institución.

Presentación

Stocknumber	No. Catálogo	Referencia	Und. / Caja	Registro INVIMA	Clase Riesgo
70-2005-1925-7	1010	3M™ Steri-Drape™ Campo de 45x30cm	10	INVIMA 2011DM-0006862	I
70-2005-3368-8	1020	3M™ Steri-Drape™ Campo de 40x40cm	10	INVIMA 2011DM-0006862	I
70-2005-3851-9	1024	3M™ Steri-Drape™ Campo de 49x40cm	10	INVIMA 2011DM-0006862	I
70-2004-6704-4	1015	3M™ Steri-Drape™ Campo en U 120x130cm	10	INVIMA 2011DM-0006862	I
70-2005-6678-8	1067	3M™ Steri-Drape™ Campo en U 87x74cm	5	INVIMA 2011DM-0006862	I
70-2005-5847-9	1071	3M™ Steri-Drape™ Campo en U	10	INVIMA 2011DM-0006862	I



120x130cm

Notas:	Datos Técnicos:	Todas las propiedades físicas y recomendaciones están basadas en pruebas que se consideran representativas, sin embargo no implican garantía alguna.
	Uso del producto:	El usuario es responsable de la determinación del uso particular del producto y su método de aplicación. 3M DESCONOCE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA O AJUSTES PARA PROPÓSITOS PARTICULARES
	Indemnizaciones:	Este producto ha sido probado en cuanto a defectos. 3M se compromete únicamente a reemplazar la cantidad de producto que se comprueba defectuoso ó la devolución del dinero a precio de compra.
	Límite de la responsabilidad:	3M no se hace responsable por daños directos, indirectos o incidentales o consecuentes derivados del uso indebido, negligencia, estricta responsabilidad o cualquier otra teoría legal. Las anteriores responsabilidades no podrán ser cambiadas excepto mediante un acuerdo escrito, firmado por alguna persona de 3M



Avenida El Dorado No. 75-93
(571) 4161666 PBX
(571) 4161677 Fax
Bogotá

Consulte más información en Nuestro Web Site: www.3m.com.co

Contáctenos

email: 3mcontacto@mmm.com

Servicio al cliente: 4108555 en Bogotá

01-8000-113636 Resto del País