

1. Información General



Producto (Según Registro Sanitario)	Grapas, Grapadoras y Grapas con Grapadora
Nombre Comercial	Grapadora EEA DST (Grapadora Circular)
Marcas	Covidien, Medtronic
Fabricante Legal	Covidien Ilc. - USA
Número de Registro Sanitario	INVIMA 2013DM-0010508
Fecha de expiración del Registro Sanitario	28 de octubre 2023
Clasificación del riesgo	III
Código GMDN	45183

2. Especificaciones

Composición	Grapas de titanio
Presentación Comercial	Unidad
Condiciones de Almacenamiento	Deben permanecer estériles, almacenados a Húmeda relativa permanente: Máximo 65% No exponerse a la luz solar directa, ni luces brillantes Almacenarse en estibas de madera o plástico a 10cm del suelo
Método de esterilización	Óxido de etileno
Vida Útil	2 Años
Referencias	

Referencia	Descripción
EEA2135	Grapadora circular 21x3.5mm
EEA25	Grapadora circular 25x4.8mm
EEA2535	Grapadora circular 25x3.5mm
EEA28	Grapadora circular 28x4.8mm
EEA31	Grapadora circular 31x4.8mm
EEA33	Grapadora circular 33x4.8mm

EEAXL2135	Grapadora circular 21x3.5mm Extralarga
EEAXL2535	Grapadora circular 25x3.5mm Extralarga
EEAXL28	Grapadora circular 28x4.8mm Extralarga
EEAXL31	Grapadora circular 31x4.8mm Extralarga
EEAXL33	Grapadora circular 33x4.8mm Extralarga

3. Descripción del Producto

Indicaciones de Uso	La Grapadora EEA series DST es utilizada en cirugía como gastrectomía total, obesidad mórbida, hemicolectomía izq. y derecha, colectomía total, cáncer de recto, cáncer de sigmoide, prolapso rectal y otros procedimientos.
---------------------	--


DESCRIPCIÓN

Sutura mecánica utilizada para realizar anastomosis término-terminal o término-lateral en procedimientos de cirugía gastrointestinal y colon.

DESCRIPCION TECNICA

- Tecnología de grapado direccional DST.
- Instrumento con presentaciones en 5 tamaños: 21, 25, 28, 31 y 33 mm.
- Coloca doble fila circular escalonada de grapas de titanio y corta simultáneamente.
- Sistema TILT-TOP (Yunque abatible) facilitando se extracción.
- El yunque provee un anillo Mylar facilitando el corte del tejido.
- Diseño del yunque más delgado con un perfil de 5mm.
- Longitud de 22 y 35 cms para ser utilizado en cirugía abierta o laparoscópica.
- Grapadora con un sellado hermético.
- Indicador de disparo visible en 240° alrededor del instrumento.

- Código de color universal.
- Sistema de seguro en el mango.
- Presentación de la Grapadora con grapas de 3.5 o 4.8 mm.
- Trocar integrado facilitando su uso y reduciendo la resistencia del tejido.
- Cuchilla en acero inoxidable de 440 con punta biselada.
- Instrumento diseñado para ser utilizado con una sola mano.
- Lábio Anastomótico 1.9 mm.
- Puede ser utilizado con el dispositivo trans-oral Orvil.

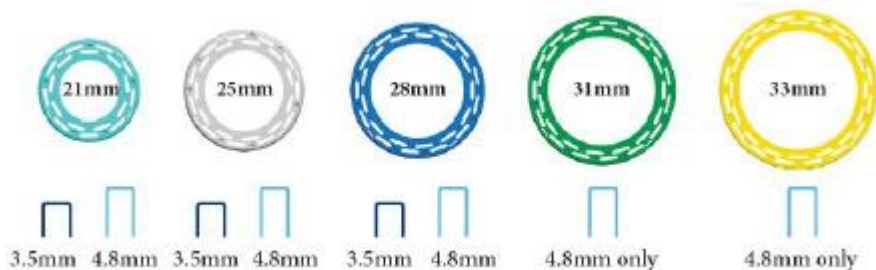

NOTA: PARA LA CORRECTA UTILIZACION DEL DISPOSITIVO POR FAVOR LEER EL INSERTO DEL PRODUCTO

Originado por: Nombre: Cargo:	Fecha:	Aprobado por: Nombre: Cargo:	Fecha:
Revisado por: Nombre: Andrea Salazar Cargo: Product Manager	Fecha: Julio 2020		